



CURAPROX



# STAROSTLIVOSŤ O ZUBNÉ PROTÉZY


SWISS PREMIUM  
ORAL CARE



# RÔZNE TYPY PROTÉZ, NO STARAŤ SA TREBA O VŠETKY

**Najlepší zub je vlastný zub. Avšak okolnosti si niekedy pýtajú aj alternatívne riešenie a jedným z nich sú zubné náhrady, nazývané aj zubné protézy. Poznáme niekoľko typov, no jedno majú spoločné – potrebu pociťovať sa o ne starať, aby sme si zachovali vlastný komfort a ústne zdravie.**


## Čiastočné náhrady

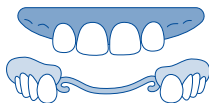

V prípade, že ste prišli o niekoľko zubov (napríklad v dôsledku nehody), jedným z riešení je čiastočná zubná náhrada. Oproti napríklad zubným implantátom ide o ekonomicky prijateľnejšiu možnosť.

Základným variantom sú zubné náhrady s jednoduchými kotviacimi prvkami. Ide o protézu, ktorá je prichytená drôťkom k iným zubom. Väčšinou však ide iba o dočasné riešenie, pretože nosenie takéhoto typu protézy nie je veľmi komfortné. Pohodlnejším riešením sú skeletové náhrady. Ich nevýhodou je, že niekedy býva viditeľný prechod medzi náhradou a vlastnými zubami. Zrejme najkomfortnejším a esteticky najlepším riešením je tzv. hybridná protéza, uchytená pomocou zásuvných spojov.

## Celkové náhrady

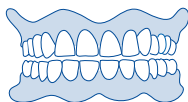


Keď človek príde o všetky zuby, je už potrebná celková zubná náhrada. Tú tvoria okrem zubov tiež ďasná a podnebie. Zuby sú vyrábané zo živice alebo keramiky, ktorá je odolnejšia. Celkové protézy v dostatočnej miere pripomínajú skutočný chrup, z estetického hľadiska teda ide o prijateľné riešenie.

Protéza po umiestnení v ústach nie je úplne nepohyblivá, preto sa pre väčší pocit komfortu zvyknú využívať fixačné prípravky. Tie prispievajú k pevnejšiemu ukotveniu náhrady v ústach. V prvých týždňoch nosenia sa môžu vyskytnúť problémy s hryzením či rozprávaním, no len čo si na protézu zvyknete, tieto problémy vymiznú.

# PREČO JE STAROSTLIVOSŤ O PROTÉZY DÔLEŽITÁ?

Chvíľu trvá, kým si na ne zvyknete. Zubné protézy sa však rýchlo stanú dôležitým prvkom vašej osobnej pohody. S nimi sa cítite istejší pri konzumácii potravy aj komunikácii s ostatnými. Nezabúdajte však, že protéza vyžaduje toľko starostlivosti ako skutočný chrup pred ňou. Inak riskujete nielen estetické, ale aj zdravotné následky.

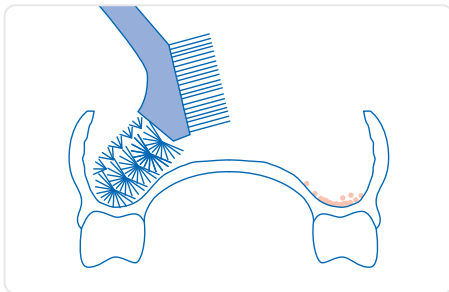

## Čo ak sa nám ďasná zapália?


Najdôležitejšie je napraviť to, čo zápal spôsobilo. Nesprávnu starostlivosť teda musíme zmeniť na správnu. Ďasná dôkladne čistite mäkkou a hustou zubnou kefkou. Okrem toho môžete liečbu urýchliť aj vyplachovaním ústnou vodou Perio Plus (podľa pokynov na letáku alebo od lekára).

Na protézach sa ukladá povlak, ktorý je potrebné pravidelne čistiť. Hromadí sa aj medzi protézou a ďasnom, preto je dôležité čistiť aj vnútornú a spodnú stranu protézy.

Aj o zachované vlastné zuby sa starajte dôkladne, vrátane čistenia medzi zubami. Nezabúdajte na preventívne prehliadky u zubára raz ročne. Vo vyššom veku je kvôli zvýšenej tvorbe zubného kameňa vhodné chodiť na dentálnu hygienu 2x ročne.

# CURAPROX BDC: PROTÉZY AKO NOVÉ AJ PO ROKOCH

Chceme, aby ste aj pri nosení protézy mali zdravú ústnu dutinu. Záleží nám na tom, aby jej nosenie bolo pre vás pohodlné a mohli ste sa s protézou hrdlo usmievať. Produkty Curaprox BDC (Biologická starostlivosť o protézy) preto namiesto chemikálií využívajú prírodnú silu. Čistia pomocou kyseliny citrónovej.

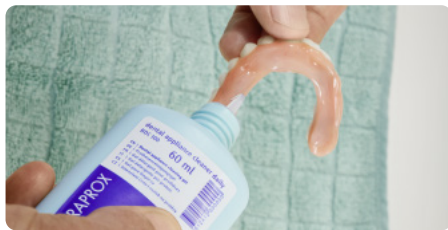

Kyselina citrónová rozpustí zubný povlak. Ten potom ľahko z protézy odstránite pomocou kefky na protézy. Poteší vás, že produkty BDC neobsahujú látky, ktoré protézu obrušujú a tiež ani žiadne agresívne zložky, ktoré by vás v ústach mohli dráždiť.

Bežné prípravky čistia protézy pomocou kyslíkového čistenia. Tým by ste však vašej protéze a ani sebe radosť neurobili. Kyslíkové čistenie totiž

pôsobí agresívne na plast, z ktorého sú protézy vyrobené. Na povrchu protéz potom vznikajú drobné prasklinky. V nich sa ľahko zachytávajú škodlivé látky aj povlak. Kvôli tomu tiež protéza pôsobí zažltnutu a zanedbane.

Našťastie produkty BDC čistia na prírodnej báze a k protéze sú šetrné. Vaša protéza tak bude aj po rokoch vyzeráť ako nová. Biela ostáva biela, ružová ostáva ružová.

Nedostatočná starostlivosť o vašu protézu môže spôsobiť:

- zapálené ďasná
- nedostatočne držiacu protézu v ústach
- nepríjemný dych
- úbytok slín a následne zvýšenú tvorbu zubného povlaku



# VŠETKO PRE PRÍRODNÚ, ŠETRNÚ A ÚČINNÚ STAROSTLIVOSŤ

Správna a komplexná starostlivosť o protézy s produktami Curaprox BDC spočíva v každodennom mechanickom čistení a týždennej dezinfekcii. Každý deň protézu vyčistíte pomocou gélu a špeciálnej kefy na protézy. Okrem toho jej raz za týždeň doprajte dezinfekciu v kúpeli z koncentrovaného roztoku a vody.

## Na každý deň



BDC 100



BDC 150

BDC 152



BDC 110



BDC 111

### BDC 100

Čistiaci gél na každodennú starostlivosť šetrne čistí a dezinfikuje. Obsahuje aj morskú soľ, ktorá stabilizuje a posilňuje účinok kyseliny citrónovej. Na každú časť protézy stačia 2-3 kvapky gélu.

### BDC 150, 152

Patentovaná kefa na protézy pomocou dvoch zväzkov vlákien odstráni povlak z celého povrchu protézy. Špirálovitá kefa čistí komplikovanejšiu vnútornú stranu, mohutné predné vlákna zas vonkajšiu stranu protéz.

### BDC 110, 111

Nádoba na odkladanie protéz, ale aj snímateľných zubných strojčekov. Má praktickú mriežku pre jednoduché vybratie protézy a vrchnák, aby vnútro nádoby ostalo čisté a chránené.

## Raz týždenne




**BDC 105**

100ml


### **BDC 105**

Roztok na týždenné čistenie obsahuje aj eukalyptový olej. Ten protéze dodáva sviežosť a zároveň na nej vytvára tenkú vrstvu, ktorá protézu chráni.


## **Ako na to?**

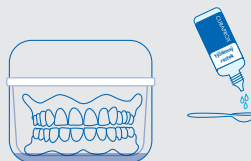

Naplňte nádobku roztokom tak, aby zakryl spodnú časť vkladacej mriežky (pri silne zanesenej protéze použite väčšie množstvo roztoku).

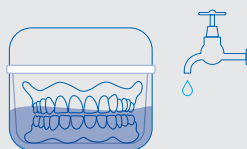

Naplňte zvyšok nádobky teplou vodou.

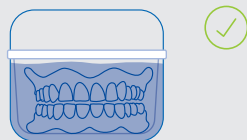

Nechajte protézu celú ponorenú v nádobke minimálne 6 hodín.

# VŠETKO POTREBNÉ V JEDNEJ TAŠTIČKE!

- čistiaci gél pre každodenné čistenie
- týždenný roztok pre intenzívne týždenné čistenie
- kefka pre efektívne mechanické čistenie protézy
- čistiaca nádobka
- ultra jemná zubná kefka pre jemnú masáž ďasien
- detailný návod starostlivosti o protézu



## 3 TIPY PRE VAŠE ĎASNÁ

1.

K čisteniu protézy je nevyhnutné pridať aj starostlivosť o zuby a ďasná. Pokiaľ nie sú ďasná poriadne vyčistené, môžu sa pod zubnou protézou zapáliť. Zubná kefka CS 5460 ultra soft je ideálna na odstránenie baktérií z ďasien pod protézou.

2.

Protézu noste len vtedy, keď ju používate a potrebujete, teda počas jedenia alebo komunikácie. V noci a v čase pokoja je ďasnám lepšie bez nej.

3.

Protézu je ideálne vyčistiť čo najskôr po každom jedle, inak zachytené zvyšky potravy pomaly podliehajú tráveniu v ústach.

